

F&P Eson™ 2

MÁSCARA NASAL



É fácil ser confiante com a Eson 2

A F&P Eson 2 foi desenvolvida para atender as necessidades dos pacientes e profissionais do sono, a cada importante etapa na jornada do tratamento com CPAP.

MAIS DE 20
APRIMORAMENTOS
NO DESIGN
COMPARADA À
F&P ESON!



É fácil ser confiante... a cada etapa do tratamento com CPAP

Para aprimorar uma máscara desenhada para oferecer desempenho e conforto, nossa equipe de desenvolvimento focou na facilidade de utilização, fornecendo a você e a seu paciente confiança a cada etapa, desde a titulação até a adesão ao tratamento.

Jornada do Tratamento com CPAP

PARA O PROFISSIONAL DO SONO

PARA O PACIENTE



1

POLISSONOGRAFIA

Como selecionar uma máscara nasal para a titulação

A F&P Eson 2 mantém a mesma tecnologia da Vedação RollFit™ que a F&P Eson, desenvolvida para fornecer uma vedação efetiva que diminua a probabilidade de vazamentos.



2

PRIMEIRO CONTATO COM O PACIENTE

Como selecionar uma máscara para utilização domiciliar

A Touca de Fixação Intuitiva fornece opções de ajuste para os pacientes, incluindo a capacidade de esticar a máscara diretamente sobre a cabeça.



3

ADAPTAÇÃO

Como ajustar e demonstrar a máscara

Os destaques azuis - VisiBlue™ - incorporados à máscara, fornecem sugestões visuais para simplificar o aprendizado sobre a máscara, tornando-o mais simples, rápido e intuitivo.



4

UTILIZAÇÃO

O paciente começa a utilizar a máscara

O foco no design para promover facilidade de ajuste e facilidade de utilização diminui a probabilidade de retornos ao profissional de sono e aumenta a confiança do paciente.



5

ADESÃO AO TRATAMENTO

Adesão ao tratamento em longo prazo

A Eson 2 foi desenvolvida para funcionar tanto na primeira noite como para aumentar a chance de sucesso do tratamento em longo prazo.



Eson™ 2

Principais características e benefícios

Estrutura Simplificada

A Estrutura Simplificada – que serve os três tamanhos de vedação – agora tem um perfil mais estreito. Essa característica permite um campo de visão mais amplo enquanto mantém a estabilidade da vedação.



VisiBlue™

Os destaques azuis incorporados nos principais componentes da máscara auxiliam os pacientes em relação à utilização, posicionamento, desmontagem e remontagem.

Touca de Fixação Intuitiva


A Touca de Fixação Premium fornece opções de ajuste para os pacientes, incluindo a capacidade de esticar e colocar a máscara diretamente sobre a cabeça.

Vedação RollFit

A Vedação RollFit foi desenvolvida para promover ajuste perfeito e vedação efetiva ao se ajustar automaticamente na ponte do nariz.

Difusor Lavável

O difusor inovador, que reduz ruídos e correntes de ar, agora é lavável e mais durável.

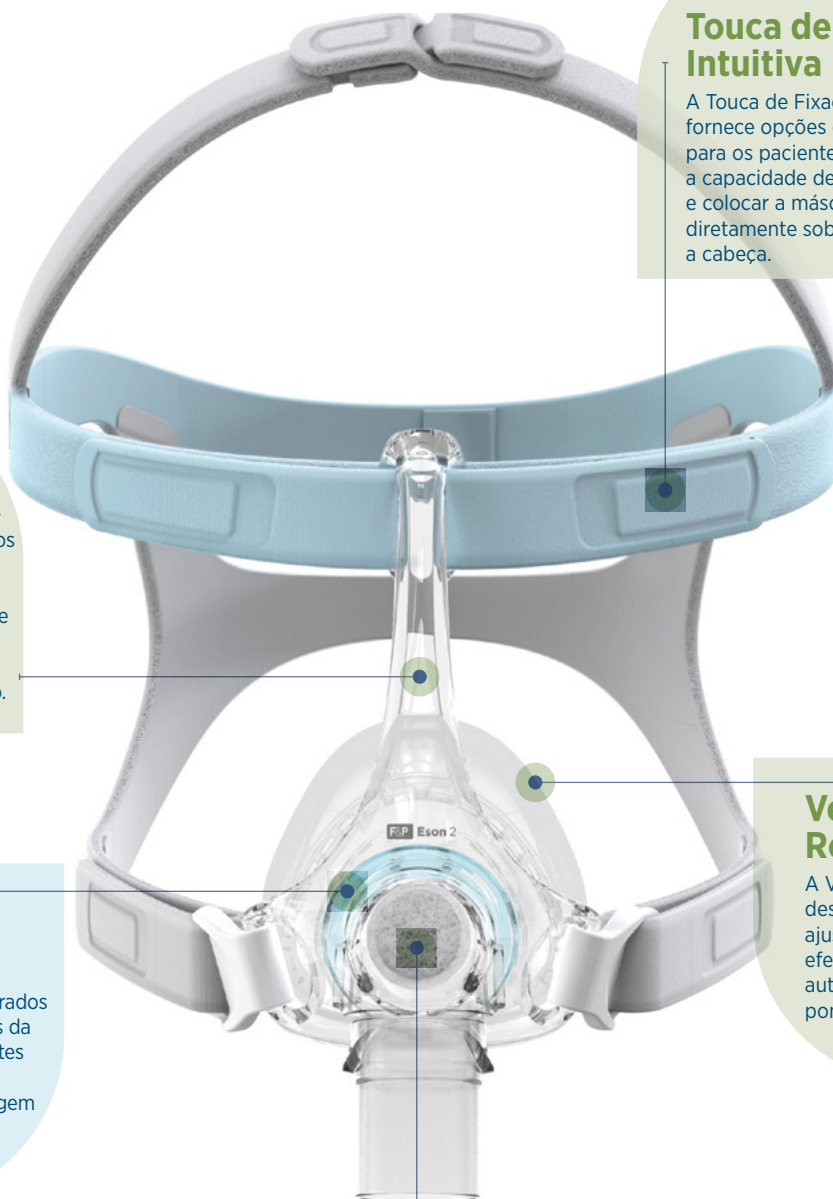

Comparando a F&P Eson e a F&P Eson 2

Foram realizadas mais de 20 alterações no design para que a máscara nasal de melhor desempenho da Fisher & Paykel Healthcare se tornasse ainda melhor.

COMPONENTE	FUNÇÃO	F&P ESON	F&P ESON 2
Vedação RollFit			
	A vedação RollFit “desliza” para frente e para trás, aliviando a pressão na ponte do nariz e permitindo ajuste automático para vários formatos de rosto. A vedação agora inclui o VisiBlue para auxiliar a correta utilização, posicionamento, desmontagem e remontagem.		
	Marco de alinhamento da vedação maior		
	Vedação mais leve e compacta		
	Destaques VisiBlue		
Touca de Fixação Intuitiva			
	Touca de Fixação Intuitiva – incorporando uma tira superior azul para auxiliar o posicionamento – que pode ser utilizada de múltiplas maneiras, como sobre a cabeça, utilizando o clipe tradicional, ou a presilha.		
	Touca de Fixação ErgoFit		
	Touca de Fixação Intuitiva com VisiBlue		
	Presilha da Touca de Fixação aprimorada com “abas de bloqueio”		
	Touca de Fixação Premium, sem costura		
Estrutura Simplificada			
	A Estrutura Simplificada serve os três tamanhos de vedação e agora tem um perfil mais estreito para aumentar o campo de visão. O difusor, o engate giratório e os cliques foram redesenhados para potencializar a facilidade de utilização.		
	Cotovelo giratório removível para que a limpeza entre múltiplos pacientes seja facilitada		
	Difusor lavável de peça única		
	Ergonomia do clipe aprimorada		
	Engate giratório redesenhado contendo VisiBlue		

CÓDIGOS PARA PEDIDOS NA AMÉRICA DO NORTE/ÁSIA-PACÍFICO

MÁSCARAS

ESN2SA	ESON2 pequena
ESN2MA	ESON2 média
ESN2LA	ESON2 grande

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

400ESN211	Vedação ESON2 pequena
400ESN212	Vedação ESON2 média
400ESN213	Vedação ESON2 grande

400ESN221	Touca de fixação ESON2 pequena
400ESN222	Touca de fixação ESON2 média/grande
400ESN231	Máscara ESON2 sem touca de fixação pequena
400ESN232	Máscara ESON2 sem touca de fixação média
400ESN233	Máscara ESON2 sem touca de fixação grande
400FPH241	Engate giratório F&P 2
400ESN251	Cliques ESON2
400ESN261	Difusor ESON2
400ESN271	Cotovelo ESON2

CÓDIGOS PARA PEDIDOS EM OUTROS PAÍSES

MÁSCARAS

ESN2SU	ESON2 pequena
ESN2MU	ESON2 média
ESN2LU	ESON2 grande

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

400ESN211	Vedação ESON2 pequena
400ESN212	Vedação ESON2 média
400ESN213	Vedação ESON2 grande

400ESN221	Touca de fixação ESON2 pequena
400ESN222	Touca de fixação ESON2 média/grande
400FPH241	Engate giratório F&P 2
400ESN251	Cliques ESON2
400ESN261	Difusor ESON2
400ESN271	Cotovelo ESON2